

- 1、打开信号发生器和示波器,用信号发生器的 CH1 和 CH2 通道产生两束同方向,同频率正弦电信号 (即两个同方向同频率简谐振动) (如: f=1kHz,VPP=4V, phase 均为 0, offset 均为 0),用示波器上对应通道 Vertical position 或 horizontal position 旋钮调节两个分通道信号至下图中合适的位置
- 2、同方向同频率正弦信号合成:按示波器 MATH 键,软键盘操作:操作选+,信号源 A 和 B 分别选好两个通道,合成信号出现,再进入菜单第 2 页,把合成图形调到合适的情况:第一个菜单是用万用旋钮调节合成信号在屏幕竖直方向的位置,第二个菜单是竖直方向 波形档位,用万用旋钮调节合成信号在竖直方向的屏显"幅度"(拍照)



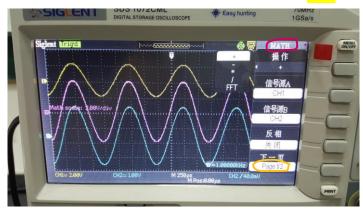


用信号发生器旋钮使 CH2 通道信号的 phase 参数逐渐改变: 0—360°, 看看合成信号 随着两个通道信号的相位差变化而怎样变化(<u>拍任意一张照片</u>)

3、将 CH2 的 phase 参数变回 0,f=2kHz 或 4kHz,CH1 保持原来参数不变,按 DEFAULT SETUP+AUTO 键,刷新示波器屏幕,显示新调整的两个通道的信号,再按 MATH 键进行同方向,不同频率简谐振动合成,可以调节 CH2 信号的 phase,随便找一个相位差对合成信号<mark>拍照</mark>

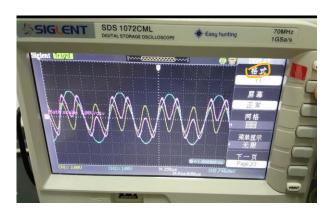

3、信号发生器将 CH1 和 CH2 调回同频率(f=1kHz 或 2kHz 或 4kHz 均可),phase=0,offset=0,按 DISPLAY 键,第二页选格式为 XY(屏幕上就没有了时间参数,横向和纵向都表示电压),合成信号,可以通过两个分通道的 position 旋钮来调节合成信号在屏幕上的位置,调节 CH2 的相位 0-360°,按下图拍两到三张照片

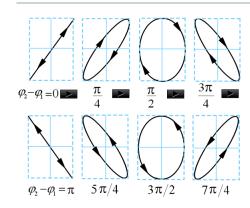



- 4、将CH2的phase恢复到0,CH1、CH2通道信号频率比分别为1:2、2:3、
- 3:4,再将CH2的phase从0-360°,<mark>分别拍三个频率比的合成信号照片</mark>

